



PROTÓCOLOS DE PERFURAÇÃO

LINHA DE IMPLANTES



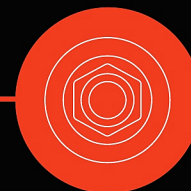

SEQUÊNCIA DE BROCAS

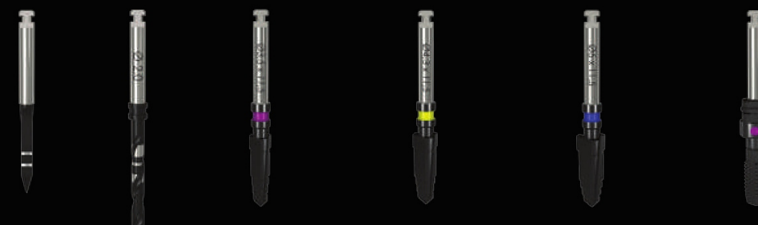

Altura	Lança	Ø 2,0	Broca Cônica Ø 3,5	Broca Cônica Ø 4,3	Broca Cônica Ø 5,0	Macho de Rosca
Ø 3,5	•	•	•			○
Ø 4,3	•	•	•	•		○

○= Opcional de acordo com a densidade óssea

CHAVE DE INSERÇÃO

- Torque interno com sistema grip de captura e inserção
- Maior resistência mecânica à inserção
- Potencializa a segurança no transporte do implante
- Preserva a integridade do cone morse
- Chave de inserção única para catraca e contra-ângulo

A instalação do implante pode ser iniciada com a chave de captura no contra-ângulo. Posteriormente, a inserção poderá ser finalizada com torquímetro manual.

	Descrição	Código
	Chave de Inserção CMH NP Curta	02.01.11.233
	Chave de Inserção CMH NP Longa	02.01.11.234



SEQUÊNCIA DE BROCAS



Altura	Lança	Ø 2,0	Ø 2,8	Ø 3,0	Ø 3,15	Ø 3,5	Ø 4,3	Macho de Rosca	Countersink UN
Ø 3,3	●	●	○					○	○
Ø 3,75	●	●	●	○				○	○
Ø 4,3	●	●	●	●	●	●	○	○	○

○= Opcional de acordo com a densidade óssea

CHAVE DE INSERÇÃO

- Torque interno com sistema grip de captura e inserção
- Maior resistência mecânica à inserção
- Potencializa a segurança no transporte do implante
- Preserva a integridade do cone morse
- Chave de inserção única para catraca e contra-ângulo

A instalação do implante pode ser iniciada com a chave de captura no contra-ângulo. Posteriormente, a inserção poderá ser finalizada com torquímetro manual.

	Descrição	Código
	Chave de Inserção CMH 3.OP Curta	02.01.11.231
	Chave de Inserção CMH 3.OP Longa	02.01.11.232
	Chave de Inserção CMH NP Curta	02.01.11.233
	Chave de Inserção CMH NP Longa	02.01.11.234



SEQUÊNCIA DE BROCAS



Altura	Lança	Ø 2,0	Ø 2,8	Ø 3,0	Ø 3,15	Ø 3,5	Ø 4,3	Countersink UN
Ø 3,5	●	●	○	○				○
Ø 4,3	●	●	●	●	○	○		○
Ø 5,0	●	●	●	●	●	●	○	○

○= Opcional de acordo com a densidade óssea

CHAVE DE INSERÇÃO

- Torque interno com sistema grip de captura e inserção
- Maior resistência mecânica à inserção
- Potencializa a segurança no transporte do implante
- Preserva a integridade do cone morse
- Chave de inserção única para catraca e contra-ângulo

A instalação do implante pode ser iniciada com a chave de captura no contra-ângulo. Posteriormente, a inserção poderá ser finalizada com torquímetro manual.

	Descrição	Código
	Chave de Inserção CMH NP Curta	02.01.11.233
	Chave de Inserção CMH NP Longa	02.01.11.234



SEQUÊNCIA DE BROCAS

								
Altura	Lança	Ø 2,0	Ø 2,8	Ø 3,0	Ø 3,15	Ø 3,5	Ø 4,3	Countersink UN
Ø 3	●	●	○					


○= Opcional de acordo com a densidade óssea

CHAVE DE INSERÇÃO

- Torque interno com sistema *grip* de captura e inserção
- Maior resistência mecânica à inserção
- Potencializa a segurança no transporte do implante
- Preserva a integridade do cone morse
- Chave de inserção única para catraca e contra-ângulo

A instalação do implante pode ser iniciada com a chave de captura no contra-ângulo.
Posteriormente, a inserção poderá ser finalizada com torquímetro manual.

	Descrição	Código
	Chave de Inserção CMH 3.OP Curta	02.01.11.231
	Chave de Inserção CMH 3.OP Longa	02.01.11.232

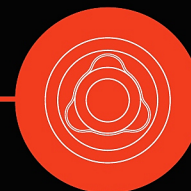

SEQUÊNCIA DE BROCAS



Altura	Lança	Ø 2,0	Broca Cônica Ø 3,5	Broca Cônica Ø 4,3	Broca Cônica Ø 5,0	Macho de Rosca
Ø 3,5	•	•	•			○
Ø 4,3	•	•	•	•		○
Ø 5,0	•	•	•	•	•	○

○ = Opcional de acordo com a densidade óssea


CHAVE DE INSERÇÃO

- Maior resistência mecânica à inserção
- Potencializa a segurança no transporte do implante
- Preserva a integridade do indexador protético cone morse

A instalação do implante pode ser iniciada com a chave de captura no contra-ângulo.

Posteriormente, a inserção poderá ser finalizada com torquímetro manual.

	Descrição	Código
	Chave de Inserção TRI NP Curta	02.01.11.048
	Chave de Inserção TRI NP Longa	02.01.11.058
	Chave de Inserção TRI RP-UP Curta	02.01.11.049
	Chave de Inserção TRI RP-UP Longa	02.01.11.059

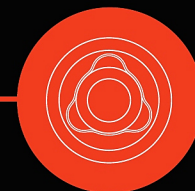

SEQUÊNCIA DE BROCAS


						
Altura	Lança	Ø 2,0	Broca Cônica Ø 3,5	Broca Cônica Ø 4,3	Broca Cônica Ø 5,0	Macho de Rosca
Ø 4,3	•	•	•	•		○


○= Opcional de acordo com a densidade óssea

CHAVE DE INSERÇÃO

- Torque interno com sistema *grip* de captura e inserção
- Maior resistência mecânica à inserção
- Potencializa a segurança no transporte do implante
- Preserva a integridade do triângulo interno
- Chave de inserção única para catraca e contra-ângulo

A instalação do implante pode ser iniciada com a chave de captura no contra-ângulo. Posteriormente, a inserção poderá ser finalizada com torquímetro manual.

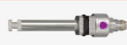	Descrição	Código
	Chave de Inserção TRI NP Curta	02.01.11.048
	Chave de Inserção TRI NP Longa	02.01.11.058

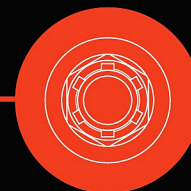

SEQUÊNCIA DE BROCAS



Altura	Lança	Ø 2,0	Ø 2,8	Ø 3,0	Ø 3,15	Ø 3,5	Ø 4,3	Macho de Rosca	Countersink UN
Ø 3,3	●	●	○					○	○
Ø 3,75	●	●	●	○				○	○
Ø 5,0	●	●	●	●	●	●	○	○	○


○ = Opcional de acordo com a densidade óssea

CHAVE DE INSERÇÃO


- Maior resistência mecânica à inserção
- Potencializa a segurança no transporte do implante
- Preserva a integridade do hexágono externo

A instalação do implante deve ser iniciada com a chave de captura no contra-ângulo. Posteriormente, a inserção poderá ser finalizada com torquímetro manual.

	Descrição	Código
	Chave de Inserção CA HEX NP Média	02.01.11.076
	Chave de Inserção CA HEX NP Longa	02.01.11.106
	Chave de Inserção CA HEX RP-UP Curta	02.01.11.096
	Chave de Inserção CA HEX RP-UP Média	02.01.11.077
	Chave de Inserção TQ HEX NP Curta	02.01.11.050
	Chave de Inserção TQ HEX NP Média	02.01.11.051
	Chave de Inserção TQ HEX RP-UP Curta	02.01.11.053
	Chave de Inserção TQ HEX RP-UP Média	02.01.11.054

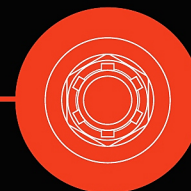

SEQUÊNCIA DE BROCAS*

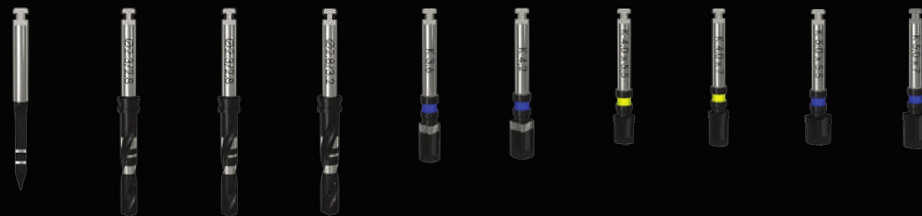

	Lança	Ø 2,0	Ø 2,8	Ø 3,2	Ø 3,6	Ø 4,2	Ø 4x5,5	Ø 4x7	Ø 5x5,5	Ø 5x7
Ø 4 x 5,5	•	•	•	•			•			
Ø 4 x 7	•	•	•	•				•		
Ø 5 x 5,5	•	•	•	•	•	•			•	
Ø 5 x 7	•	•	•	•	•	•				•

* Recomendamos o uso do Kit de Brocas Kort (página 56)

CHAVE DE INSERÇÃO

- Maior resistência mecânica à inserção
- Potencializa a segurança no transporte do implante
- Preserva a integridade do hexágono externo

A instalação do implante deve ser iniciada com a chave de captura no contra-ângulo.

Posteriormente, a inserção poderá ser finalizada com torquímetro manual.

	Descrição	Código
	Chave de Inserção CA HEX NP Média	02.01.11.076
	Chave de Inserção CA HEX NP Longa	02.01.11.106
	Chave de Inserção CA HEX RP-UP Curta	02.01.11.096
	Chave de Inserção CA HEX RP-UP Média	02.01.11.077
	Chave de Inserção TQ HEX NP Curta	02.01.11.050
	Chave de Inserção TQ HEX NP Média	02.01.11.051
	Chave de Inserção TQ HEX RP-UP Curta	02.01.11.053
	Chave de Inserção TQ HEX RP-UP Média	02.01.11.054